


POLYWEL 3D[®]

DISTRIBUTEUR EN TUBES ET FLACONS

Polyvalence, précision et rapidité

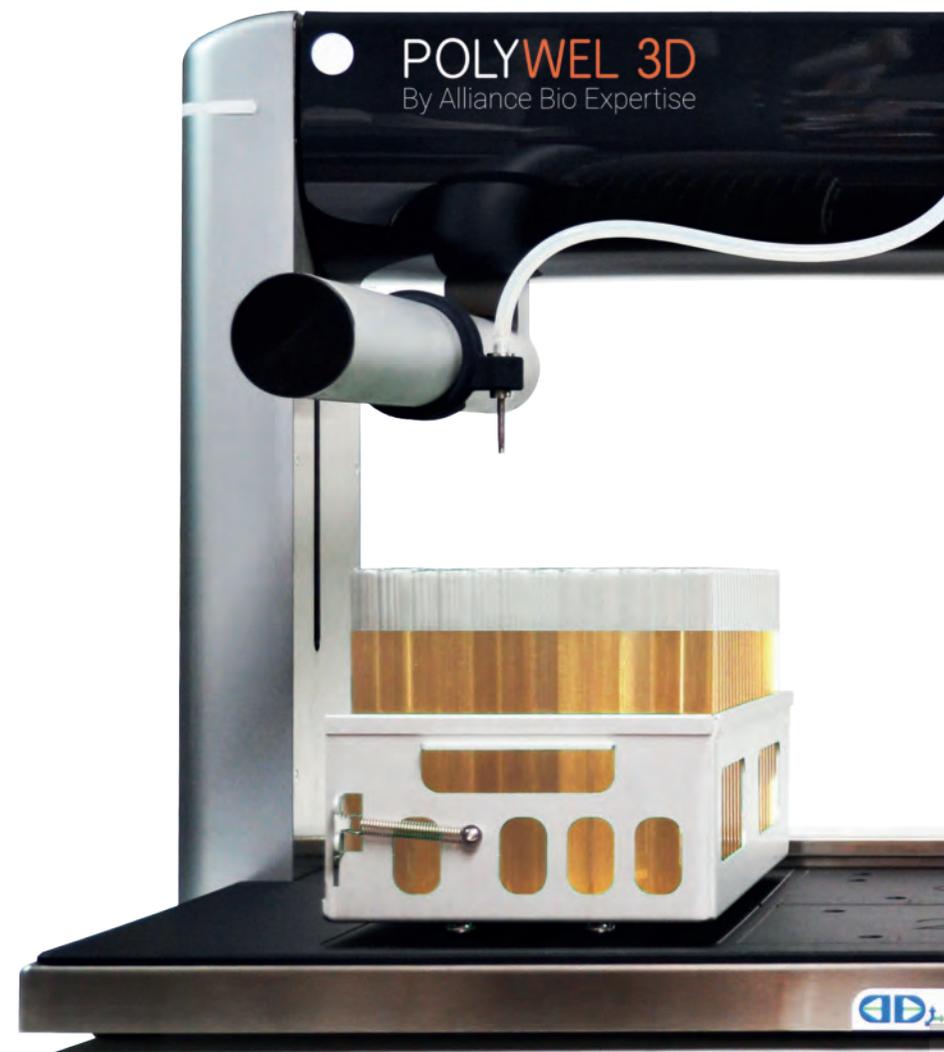

DISTRIBUTEUR EN TUBES ET FLACONS

Polyvalence, précision et rapidité

POLYWEL 3D®

 1000 tubes par heure / par cycle*



8 racks de 120 tubes ou 4 racks de 250 tubes

Pilotage en 3D

Flexible et adaptable
à vos différents contenants

Embouts de distribution

Ø 3mm : précision 
Ø 6mm : rapidité 

Racks autoclavables



 Indicateur de fin de cycle multicolore

 Jusqu'à 20 programmes rapides à lancer (≥ 5 ml)

Précision : ± 0,1 ml
Calibration en début de cycle
Vérification en cours de cycle

Nettoyage facile

 Plateau amovible et surface en acier inoxydable




* Pour diamètre de tube 18mm (9 ml)



SPÉCIFICATIONS

Adaptabilité pour les contenants

Distribution de gélases, bouillons ou autres milieux en tubes et flacons.

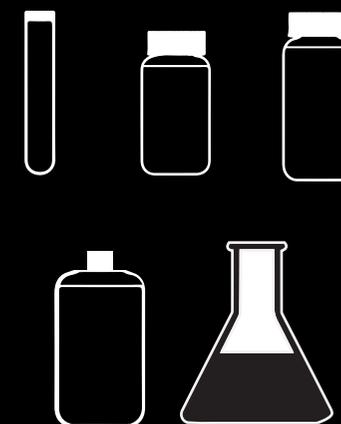

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volume de distribution	De 1 à 9999,9 ml
Tubes par heures (Ø 18mm/9ml)	1000
Tubes par racks (Ø 18mm)	Grand rack : 250 / Petit rack : 120
Programmes	20
Diamètres tuyaux	1,6 mm / 3,2 mm / 6,4 mm
Vitesse ajustable	✓
Calibration	Début de cycle et pendant le cycle
Tailles maximales des contenants	Hauteur : entre 115 et 250 mm Largeur : jusqu'à 190 mm Profondeur : jusqu'à 390 mmm
Dimensions	1130 x 600 x 610 mm
Alimentation électrique	120 – 240V (±10%) 50 – 60 Hz / 160W
Garantie	1 an
Origine	France



Portoirs sur mesure disponibles sur demande !

ACCESSOIRES



Livré avec :

Polywel 3D (POLW1001) - Polypump 3D (POLW2000) - Jeu de tuyau 3.2 mm avec embout de distribution (POLW2008) - Rack 250 (POLW2002) - Clé USB avec manuel utilisateur et procès verbal

Accessoires :

- POLW2000 : Polypump 3D
- POLW2001 : Rack 120
- POLW2002 : Rack 250
- POLW2003 : Support de chargement incliné pour rack
- POLW2004 : Jeu de tuyau 1.6 mm sans embout de distribution
- POLW2005 : Jeu de tuyau 3.2 mm sans embout de distribution
- POLW2006 : Jeu de tuyau 6.4 mm sans embout de distribution
- POLW2007 : Jeu de tuyau 1.6 mm avec embout de distribution
- POLW2008 : Jeu de tuyau 3.2 mm avec embout de distribution
- POLW2009 : Jeu de tuyau 6.4 mm avec embout de distribution
- POLW2010 : Embout de distribution 1.6 mm
- POLW2011 : Embout de distribution 3.2 mm
- POLW2012 : Embout de distribution 6.4 mm
- POLW2013 : Support embout de distribution
- POLW2014 : Tête de pompe de précision



20 ANS D'EXPÉRIENCE

DANS LE DESIGN D'ÉQUIPEMENTS POUR LA MICROBIOLOGIE

**UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
DE TECHNICIENS ET MICROBIOLOGISTES**



**PLUS DE 70 DISTRIBUTEURS A L'INTERNATIONAL
FORMÉS SUR LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES A.B.E.**




**UNE GÉNÉRATION D'ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS
POUR LA TRACABILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ**



PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS ALIMENTAIRES


PRÉPARATION AUTOMATISÉE DES MILIEUX DE CULTURE

ÉCHANTILLONAGE D'AIR

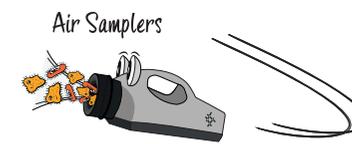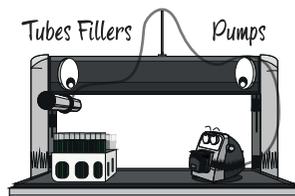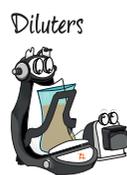

RÉSERVEZ VOTRE DÉMO !

<https://www.alliance-bio-expertise.com/en/store-locator/>

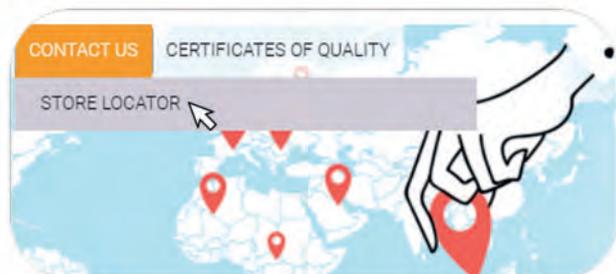

SUIVEZ LE BLOG

alliance-bio-expertise.com



ZI de Courbouton, Le Tremplin - 35480 GUIPRY - FRANCE



E-mail : contact@abioexpertise.com



Phone : +33(0)2.40.51.79.53



alliance-bio-expertise.com