

DILUCUP[®]

Système semi-automatisé
pour dilutions en série.




Dilucup®


Dilucup® est un dispositif contenant des cupules calibrées de 9ml d'un diluant stérile. Il est disponible en plaquette de 21 ou 42 Dilucup®. Destiné à une utilisation avec un homogénéisateur Dilugent™ ou Dilushaker™, le Dilucup® permet la standardisation du processus de dilution tout en limitant les variations entre technologistes.

- Disponible en 3 formulations: MRD, EPT et NACL.
- Livrable en plaquettes de 21 ou 42 Dilucup®.
- Diluant prêt à l'emploi.
- Membrane protectrice facile à retirer.
- Longue durée de vie à température ambiante (12 à 18 mois).
- Livré avec les certificats d'analyses (CoA).
- Emballage optimisé pour un gain d'espace.


Procédure simple

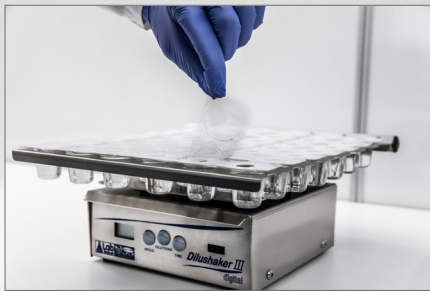

Ouverture

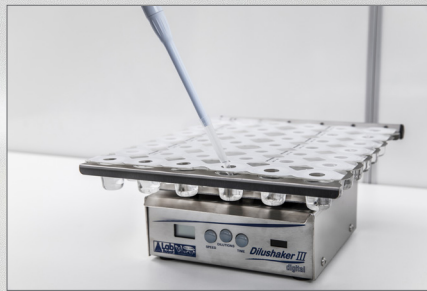

Dilution

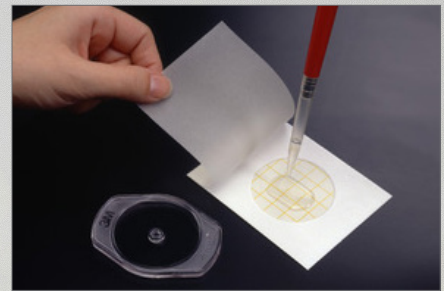

Inoculation



Dilugent™

L'agitateur Dilugent™ constitue la toute dernière innovation du système Dilucup®. Destiné à la production de dilutions standardisées et reproductibles. Le Dilugent™ rehausse le niveau d'automatisation des Dilucup® en vortexant automatiquement les dilutions selon les paramètres définis par l'utilisateur.

- Utilisation d'indicateurs contextuels LED permettant le suivi du processus de dilution.
- Écran tactile pour une programmation efficace et rapide.
- Temps d'agitation, vitesse et nombre de dilutions ajustables.
- 2 détecteurs de mouvement (gauche/droite) pour activer l'agitation.
- Disponible en versions Light (économique), standard (optimal) et Pro (traceabilité).



Dilushaker™

Le Dilushaker™ permet d'effectuer des dilutions hautement standardisées et reproductibles. Il constitue une solution efficace pour accroître l'efficacité et la qualité des dilutions sériées tout en éliminant la préparation fastidieuse des tubes à dilution. Le Dilushaker™ vortex chaque dilution suivant les paramètres choisis par l'utilisateur.

- Indicateurs LED montés sur une rampe permet de suivre le processus de dilution.
- Vitesse et temps d'agitation ajustable de même que le nombre de dilutions par échantillon.
- Détecteur de mouvement frontal qui active l'agitation.
- Disponible en configuration de 21 et 42 dilucup®.



Diligent™ Shaker & Accessoires

POUR COMMANDER



40DGT84LT	Diligent™ Shaker Light
40DGT84SD	Diligent™ Shaker standard
40DGT84PO	Diligent™ Shaker Pro
40FS02	Interrupteur à pied
40PS85	Cordon d'alimentation, 12V
40SC04	Lecteur pour code barre.

FICHE TECHNIQUE

Alimentation	115V, 1.6Amps, 50/60HZ
Plateau	30 X 26 X 2.2 cm / 12 X 10 X 1 po.
Base	38 X 29.5 X 5 cm / 15 X 11.6 X 2 po.
Écran	12.7 X 18.4 X 1.1 cm / 5 X 7 X 0.5 po
Poids	5.1 Kg

Dilushaker™ & Accessoires

POUR COMMANDER



40DS21PRXT	Dilushaker™, rampe 3 LED pour 3 X 7 Dilucup®
40DS42PRXT	Dilushaker™, rampe 6 LED pour 6 X 7 Dilucup®
40FS02	Interrupteur à pied
40PS12	Cordon d'alimentation, 12V

FICHE TECHNIQUE

Alimentation	115V, 1.6Amps, 50/60HZ
Plateau (3 X 7)	19 X 34.5 X 11.5 cm / 7.5 X 13.5 X 4.5 po.
Plateau (6 X 7)	26 X 34.5 X 11.5 cm / 10 X 13.5 X 4.5 po
Poids	4.8 Kg

Dilucup®

POUR COMMANDER



40DEMRD3	Dilucup® MRD 3 X 7 cups, 672 cups par bte
40DEMRD6	Dilucup® MRD 6 X 7 cups, 672 cups par bte
40DEBPW3	Dilucup® BPW 3 X 7 cups, 672 cups par bte
40DEBPW6	Dilucup® BPW 6 X 7 cups, 672 cups par bte
40DENACL3	Dilucup® NACL 3 X 7 cups, 672 cups par bte
40DENACL6	Dilucup® NACL 6 X 7 cups, 672 cups par bte
815.1000	Pipette 1ml
6486	Embouts 1 ml stérile , portoir 960

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique disponible pour chaque formulation de Dilucup®